

approved by mommy

# Ramili<sup>®</sup> baby



*Care from Britain*

DIGITALES FIEBERTHERMOMETER MIT FLEXIBLER SPITZE

ET 2003



**Bedienungsanleitung**

**D**

## Sicherheitshinweise

- Dieses Thermometer ist ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt.
- Thermometer nicht fallen lassen. Es ist weder stoß- noch schlagfest.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Auf das Thermometer darf nicht gebissen werden.
- Gerät nicht öffnen.
- Die Benutzung außerhalb der vorgesehenen Betriebsbedingungen kann zu ungenauen Messwerten führen.
- Die Messspitze darf nicht übermäßig verbogen werden. Biegen Sie die Spitze um mehr als 45 Grad!
- Reinigen Sie das Thermometer vor und nach jeder Anwendung.
- Das Thermometer ist ein elektronisches Gerät und beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Durch die geringe Messdauer, die hohe Genauigkeit und die flexible Messspitze ist das Gerät besonders für die Körpertemperaturmessung bei Babys und Kleinkindern geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

## Messarten

### Im After (rektal)

Die Messspitze wird vorsichtig 1-2 cm weit in den After eingeführt. Mindestmesszeit: 30 Sekunden.

**Verwenden Sie nicht denselben Thermometer für das rektal und mündlich Fiebermessen!**

### Im Mund (oral/sublingual)

Nehmen Sie vor der Messung mindestens 10 Minuten lang keine kalten oder warmen Speisen und Getränke zu sich. Führen Sie die Messspitze in eine der beiden Wärmetaschen unter der Zunge links oder rechts der Zungenwurzel ein. Schließen Sie den Mund und atmen Sie ruhig durch die Nase. Mindestmesszeit: 60 Sekunden.


### Unter dem Arm (axillar)

Die Haut muss absolut trocken sein. Platzieren Sie die Messspitze so unter dem Arm, dass sie einen guten Hautkontakt hat. Das Thermometer steht rechtwinklig zum Körper. Legen Sie den Arm über die Brust, so dass die Messspitze dicht anliegt. Mindestmesszeit: 3 Minuten.

Rektal gemessene Temperaturen sind generell 0,5 °C höher und axillar gemessene 0,5 °C niedriger als oral gemessene Temperaturen

**Achtung: Bei hohem Fieber sollten Sie auf jeden Fall ein Arzt zu Rate ziehen!**

## Bedienelemente

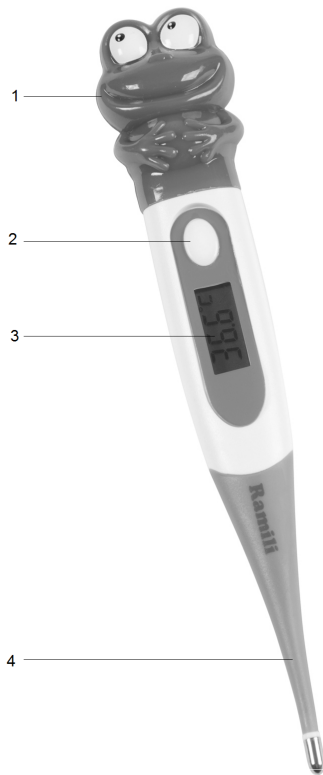

- 1 Abdeckung
- 2 Ein-/Aus-Taste
- 3 Display
- 4 Messspitze

## Bedienung

Drücken Sie zum Einschalten die Ein/Aus-Taste. Ein kurzer Ton signalisiert „Thermometer an“. Gleichzeitig wird eine optische Vollsegmentkontrolle des Displays durchgeführt. Dann wird für ca. 2 Sekunden der letzte Messwert angezeigt. Anschließend erscheint ein interner Testwert von  $37,00\text{ °C} \pm 0,01\text{ °C}$  und das Thermometer schaltet in den Messmodus. Sie können nun eine neue Messung durchführen.

Wenn die Umgebungstemperatur liegt unter  $32\text{ °C}$  blink dann die Anzeige  $L\text{ °C}$



Wenn die Umgebungstemperatur liegt über  $42\text{ °C}$  blink dann die Anzeige  $Hi\text{ °C}$



## Entsorgung



Die sachgerechte Entsorgung des Anhängerkamera-Sets nach deren Funktionstüchtigkeit obliegt dem Betreiber. Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften ihres Landes. Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Im Rahmen der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektround Elektronikgeräten wird das Gerät bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen oder kann zu Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, zurückgebracht werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Diese Anlage entspricht der europäischen R&TTE Richtlinie.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website [www.ramili.com](http://www.ramili.com)

### Ramili Group, London.

UK Limited Company (number: 8313501).

Address: 137 Brent Street,  
London, NW4 4DJ, United Kingdom.

Web: [www.ramili.co.uk](http://www.ramili.co.uk)

*approved by mommy*

**Ramili**<sup>®</sup>  
baby

